

VANISHPOINT®

Segurança no design

► Mecanismo de segurança automático

Dispositivos de segurança projetados com características de segurança automática ou semiautomática têm probabilidade 10 vezes menor de estar associado com acidentes com agulhas (NSIs) do que os dispositivos na qual a ativação do recurso de segurança é totalmente manual".

► Ativação pré-remoção elimina praticamente toda a exposição à agulha

► Ativação com uma mão

► Mecanismo de disparo reduz o risco de ativação inadvertida

► Fechamento do tubo quando a agulha retrai, reduzindo o risco de exposição ao sangue

► Permanece seguro durante o descarte

► Fácil de usar, exige treinamento mínimo

► Seguro e eficaz para os pacientes

* W. Tosini, et al., "Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices: Results of a French Multicenter Study," *Infection Control and Hospital Epidemiology*, vol. 31, no. 4 (Abril 2010), pg. 402-407.

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint® 50 por caixa/200 por estojo


Número de catálogo	Calibra da Agulha	Comprimento da Agulha	Comprimento do Tubo	Codificação por Cor (Cor do Acionador)
24011	25	19 mm	178 mm	Laranja ◀
24021	23	19 mm	178 mm	Azul ▶
24031	21	19 mm	178 mm	Verde Escuro ▶
24111	25	19 mm	305 mm	Laranja ▶
24121	23	19 mm	305 mm	Azul ▶
24131	21	19 mm	305 mm	Verde Escuro ▶

Para maiores informações, entre em contato com o RTI ou acesse nosso site: www.vanishpoint.com.

Outros Produtos de Segurança Disponíveis



Seringa Patient Safe®

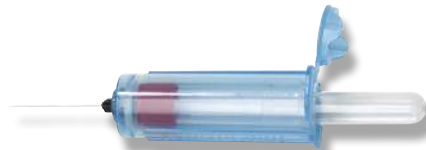

Porta-tubos de Recolha de Sangue VanishPoint®



Seringa VanishPoint®



Cateter I.V. VanishPoint®



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.

www.vanishpoint.com

© 2012, 2016 Retractable Technologies, Inc.
Todos os direitos reservados. M041 REV.4 PT, MAY 2016

511 Lobo Lane
Little Elm, Texas 75068-5295 EUA
Tel.: +1 (972) 294-1770
Fax: +1 (972) 294-4400

Ligação gratuita nos EUA: 1-888-703-1010
rtisales@vanishpoint.com

TOTAL SEGURANÇA PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PACIENTES




VANISHpoint®
KIT DE COLETA DE SANGUE

O novo parão de segurança

1

Realize a punção venosa, observando o retorno do sangue.



2

Quando terminar de coletar o sangue, aperte o acionador de retração.



3

A agulha é retraída automaticamente da veia do paciente para o dispositivo, fechando o tubo.



4

Elimine a conjunto de coleta de sangue VanishPoint® num recipiente apropriado para instrumentos pontiagudos.



Porta-tubo não incluso

AS VANTAGENS de VANISHPOINT®

Conjunto de coleta de sangue VanishPoint® Retração automática na veia reduz de forma eficaz o risco de acidentes com agulhas e exposição sanguínea

Apoio para os dedos facilita o manuseio

Indicador do acionador é codificado por cores para a bitola da agulha



Corpo transparente possibilita visualização do retorno

Agulha é retraída diretamente do paciente, eliminando quase toda a exposição à agulha contaminada



Retração da agulha fecha o tubo, reduzindo o risco de exposição ao sangue

- ▶ Design com disparador reduz o risco de ativação inadvertida
- ▶ Tubo resistente à torção com 178 mm e 305 mm de comprimento
- ▶ Inclui adaptador removível

- ▶ Não é fabricado com látex de borracha natural
- ▶ Não é fabricado com DEHP nem PVC
- ▶ Pode ser utilizada para infusão de curto prazo (até 2 horas)